



# POWER FOOT

PF-1500

**Руководство по эксплуатации**

OTO Power Foot PF-1500

Массажер икр и стоп

**A SINGAPORE  
Branded Product**

SPECIALLY FOR OTO POWER FOOT

**Авторское право**

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании OTO BODYCARE SINGAPORE.

# СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	1
Меры безопасности.....	2
Состав массажера.....	4
Подготовка к эксплуатации .....	5
Порядок эксплуатации.....	6
Устранение проблем .....	8
Хранение и обслуживание.....	9
Спецификация .....	10
Гарантийный сертификат .....	11
Гарантийные обязательства .....	12



# ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор ОТО Power Foot PF-1500 - массажера ступней и икр, который станет отличным помощником в поддержании здоровья и отдыха Ваших ног.

Массажер ОТО Power Foot был проверен и подтвердил свою безопасность и надежность для личного использования. Прежде чем начать использование Вашего нового массажера ОТО Power Foot, пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство по эксплуатации для правильного использования и обслуживания этого продукта.

Это Руководство по эксплуатации должно оставаться всегда под рукой.





# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, тщательно прочитайте этот раздел перед использованием, чтобы узнать все о правильном использовании и применении продукта.

Пункты, указанные здесь, обязательны для выполнения при использовании этого продукта и служат для предотвращения опасности нанесения травм пользователю или другим людям.

После прочтения, пожалуйста, держите это руководство под рукой, чтобы в любое время Вы могли легко к нему обратиться в случае возникновения вопросов.

1. Следующие люди должны консультироваться со своим врачом прежде, чем использовать этот продукт.

- Кто страдает от злокачественной опухоли или порока сердца, сильно болен или заболевает
- Кто использует встроенные медицинские электронные устройства, вneiderенные в тело, такие как электрокардиостимуляторы
- Кто имеет любые отклонения в своем развитии или уродство или искривление костей
- Кто недавно прошел курс лечения
- Кто плохо себя чувствует или находится под наблюдением врача
- Кто имеет проблемы с кровообращением в ногах или варикозное расширение вен
- У кого жар или высокая температура
- Женщины в период беременности или в период менструации
- Кто страдает от ломкости костей и остеопороза или анемии
- Люди с растяжением мышц ног или вывихом суставов ног или ступней
- У кого слабые или травмированные кости
- В послеоперационный период
- Кто имеет проблемы кровообращения или тромбоз вен
- У кого есть варикозный дерматит
- Кто страдает кожными заболеваниями
- Кто имеет открытые раны ног или ступней
- Кто страдает заболеваниями ног или икр, например микозом
- Кто проходит медицинское лечение или находится под медицинским присмотром

2. В случае поломки массажера, немедленно отсоедините шнур питания и проконсультируйтесь с представительством OTO Bodyscare или ее уполномоченными дилерами.

3. Снимите обувь перед использованием массажера.



4. Не повреждайте питающий шнур, не переделывайте его, не пытайтесь его сильно сгибать, растягивать или сматывать. Избегайте нахождения питающего шнура под тяжелыми объектами или его защемления, при перемещении массажера. Поврежденный шнур питания может привести к возгоранию, короткому замыканию или поражению электрическим током.
5. Не позволяйте воде попадать на массажер.
6. Вода и электричество - опасная комбинация. Не используйте продукт в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной или около душа или плавательного бассейна).
7. Этот массажер не предназначен для использования людьми (включая детей) с неразвитыми физическими, сенсорными или умственными способностями, или неопытными людьми, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы относительно использования массажера человеком, ответственным за их безопасность.
8. Дети должны использовать массажер только под контролем родителей, чтобы гарантировать, что они не играют с массажером.
9. Никогда не оставляйте массажер без присмотра, если он включен в сеть.
10. Не используйте массажер, если штепсельная вилка, сетевой шнур или сам массажер поврежден.
11. Массажер должен использоваться только одним человеком во время массажа. Использование массажера двумя людьми одновременно (каждый по одной ноге в двух нишах массажера) может вызвать ранение обоих пользователей.
12. Не используйте массажер, если его съемное покрытие повреждено или в случае механической или электронной поломки, немедленно свяжитесь с представительством ОТО Vodycare или ее уполномоченными дилерами.
13. Не садитесь и не вставайте на массажер.
14. Не садитесь на кресло с колесами или в кресло качалку, когда используете массажер.
15. Не используйте массажер в помещении с высокой температурой или рядом с горячими объектами (например, нагревателем).
16. Не используйте массажер совместно с другими электрическими приборами для комплексного массажа или физической терапии.
17. Не вставляйте в массажер никакие предметы (например, подушку или полотенце), вещества (например, медицинские или косметические кремы или лосьоны) или другие части тела (например, руку, ладонь или голову).
18. Не натирайте ноги и ступни медицинским или косметическим кремом или лосьоном перед или во время использования массажера.
19. Если массажер имеет любое повреждение (например, неисправность ниши для ног, икр, массажной клавиатуры, панели управления или шнура питания), прекратите его использование.
20. Обязательно возвратите массажер ОТО Vodycare или ее уполномоченным дилерам для экспертизы или ремонта.
21. Не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно, во избежание потери гарантии.

### **Электромагнитные поля (ЭМП)**


Данный массажер соответствует всем стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкции, приведенной в руководстве пользователя, массажер является безопасным для использования основываясь на научных данных, полученных на сегодняшний день.



# СОСТАВ МАССАЖЕРА

## Общее описание

- A Панель управления
- A1 SPEED Кнопка (предназначена для выбора скорости массажа)
- A2 ON/OFF Кнопка (предназначена для включения и выключения массажа)
- A3 MODE Кнопка (предназначена для выбора типа массажа)
- B Съемное покрытие
- C Ниша для ног
- D Ручка
- E Клавиатура массажа икр
- F Сетевой шнур
- G Кнопка питания I/O (предназначена для включения / выключения продукта)
- H Скоба регулировки угла наклона массажера

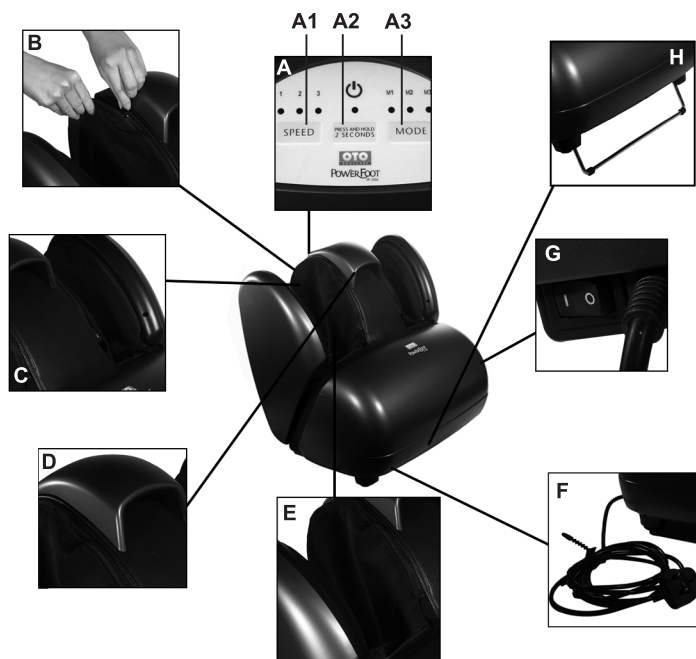

# ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поставьте массажер на пол перед стулом, на котором Вы будете сидеть во время использования массажера.  
(Примечание: Если Вы хотите использовать массажер на деревянном полу, установите его на коврик или другое мягкое ровное покрытие. Это поможет Вам уменьшить шум и вибрацию при работе массажера).
2. Проверьте, что на стопах нет никаких инородных предметов.
3. Если Вы хотите использовать массажер, сидя вертикально на стуле, удостоверьтесь, что скоба регулирования угла наклона массажера свернута.
4. Если Вы хотите использовать продукт, откидываясь назад на стуле или кресле, разверните угловую скобу регулирования угла наклона массажера. Удостоверьтесь, что скоба регулирования угла наклона находится в зафиксированном положении.



# ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вставьте штепсельную вилку в розетку.



- Включите питание массажера, переведя кнопку I/O в положение I. Индикатор питания на панели управления загорится красным светом.



- Снимите обувь, носки и любые другие аксессуары (например, кольца на пальцах ног или браслеты на лодыжках ног) с Ваших ног и ступней. (Примечание: Когда Вы только начинаете использовать массажер, Вы можете надеть на ноги тонкие хлопковые носки для большего комфорта)



- Сядьте удобно на устойчивый стул. Не используйте стул на колесиках или кресло качалку.



- Вставьте свои ноги в ниши для ног и разместите икры между массажными подушками икр.



- Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 2 секунд. Индикатор питания на панели управления загорится зеленым светом. Массажер начинает работать на самой низкой скорости (скорость 1 кнопки SPEED). Сеанс массажа длится 10 минут. После окончания 10 минут массажер автоматически переключается в режим ожидания (Индикатор питания на панели управления загорается красным светом).



(Примечание: Вы можете остановить массаж в любое время, нажав кнопку ON/OFF на панели управления. Дождитесь момента, когда передвигающиеся массажные подушки икр раздвинутся прежде, чем Вы вытащите свои ноги).

(Примечание: Вы можете проводить до 3 сеансов массажа в день. Проведение большого количества сеансов может привести к побочным эффектам, например к растяжению мышц).

(Примечание: Если во время проведения сеанса массажа произошло отключение напряжения питания, не стоит паниковать. Медленно продвиньте Ваши стопы и осторожно выньте Ваши ноги из массажера).

- Вы можете настроить массаж по Вашему собственному предпочтению 2 способами:

- Вы можете выбрать 1 из 3 скоростей массажа кнопкой SPEED. Индикатор скорости загорается согласно выбранному уровню.
- Вы можете выбрать 1 из 3 типов массажа кнопкой MODE. Индикатор типа массажа загорается согласно выбранному типу.



- Отрегулируйте положение Ваших подошв, пяток, пальцев ног и икр по Вашему предпочтению для более комфортного массажа.

- Если Вы хотите сосредоточить массаж на пальцах ног, переместить ноги таким образом, чтобы Ваши пальцы находились в хорошем контакте с передним массажным роликом. Если Вы хотите сосредоточить массаж на пятках, переместить ноги таким образом, чтобы Ваши пятки находились в хорошем контакте с задним массажным роликом.

- После использования, выключите массажер, установив кнопку питания I/O в положение O и вытащив штепсельную вилку питания из розетки.



# УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Этот раздел описывает общие проблемы, с которыми Вы можете столкнуться при работе массажера. Если Вы не можете решить проблему сами, пожалуйста, немедленно свяжитесь с представительством ОТО Bodyscare или ее уполномоченными дилерами. Если Вы столкнулись с проблемой, которая не упомянута в списке неисправностей, сначала попробуйте провести следующее:

1. Выключите массажер и выньте штепсельную вилку из розетки.
2. Оставьте массажер выключенным в течение 10 минут.
3. Вставьте штепсельную вилку в розетку и включите массажер снова.

Если проблема сохранится, свяжитесь с представительством ОТО Bodyscare или ее уполномоченными дилерами.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не включается	Массажер не подключен к питанию.	Вставьте штепсельную вилку в розетку 220 В.
	Выключатель питания I/O установлен в положении O.	Установите выключатель питания I/O в положение I.
	Вы не держали кнопку ON/OFF в течение 2 сек.	Нажмите и держите кнопку ON/OFF в течение 2 секунд.
	Массажер закончил 10-минут сеанс и автоматически перешел в режим ожидания.	Для начала нового сеанса нажмите и держите кнопку ON/OFF в течение 2 секунд.
	Массажер работал непрерывно в течение 30 минут, что привело к его автовыключению во избежание перегрева. При этом, SPEED индикатор начинает мигать.	Выключите массажер, установив выключатель I/O в положение O и отключите массажер от сети. Дайте массажеру остыть в течение 60 мин. прежде, чем Вы сможете использовать его снова.
	На массажер было произведено чрезмерное давление сверху.	Выключите массажер и удалите тяжелый предмет с массажера. Подключите массажер к питанию и снова его включите.
Корпус массажера нагрелся.	Вы выполняли несколько 10 минутных сеансов массажа подряд.	Выключите массажер и дайте ему остыть. Всегда отключайте массажер от розетки после использования.
Из отделения для стоп слышен звук	Этот звук вызван механической структурой массажных роликов.	Издавание звука при работе массажера - это нормальное явление.
Такой же звук издается из массажных подушек икр.	Этот звук вызван механической структурой массажной подушки и трением подушки о ткань одежды.	Издавание такого звука при работе массажера - это нормальное явление.

# ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Очистка внешней поверхности массажера

1. Установив выключатель I/O в положение O и отключите массажер от сети.
2. Очистите внешнюю поверхность массажера сухой тканью. Не используйте моющую ткань или чистящие средства для очистки массажера.

## Очистка съёмных внутренних чехлов

Чтобы постоянно поддерживать гигиеническую чистоту массажера, нужно регулярно мыть его внутренние съёмные чехлы. Не используйте массажер без внутренних чехлов.

1. Выключите массажер, установив выключатель I/O в положение O и отключите его от розетки.
2. Снимите внутренние чехлы массажера (см. раздел “Снятие чехлов” ниже). Снимайте только чехлы чтобы избежать поражения электрическим током, никогда не открывайте или удаляйте внутреннюю обивку массажера.
3. Соедините «Застежки на липучке» чехлов вместе, чтобы избежать повреждения других тканей во время мытья.
4. Застирайте чехлы вручную или в стиральной машине.
5. Дайте им высохнуть.
6. Снова прикрепите чехлы к массажеру (см. раздел “Прикрепление чехлов”).

## Снятие чехлов

1. Расстегните молнию на обоих съёмных чехлах.
2. Отсоедините застёжки на “липучке” изнутри и спереди отделения для ног.

## Прикрепление чехлов

(Примечание: Удостоверьтесь, что Вы правильно расположили чехлы и застежка на “липучке” прикреплена надежно. Неправильное расположение и закрепление чехлов может повлиять на эффективность массажа).

1. Удостоверьтесь, что массажер отключен от сети.
2. Вставьте конец чехла в отделение для ног.
3. Приложите полосу застёжки на “липучке” к дальнему концу отделения для ног.
4. Закройте две застёжки - молнии чехлов.
5. Закрепите полосу застёжки на “липучке” к передней части и спинке отделения для ног.

## Хранение

1. Выключите массажер, установив выключатель I/O в положение O и отключите его от розетки.
2. Храните массажер в прохладном, сухом и темном месте. Не размещайте тяжелые предметы сверху массажера.

## Замена чехлов

Если съёмные чехлы повреждены, прекратите использовать массажер и закажите новые чехлы в представительстве ОТО Bodycare. Вставьте новые чехлы прежде, чем Вы будете использовать массажер снова.





# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	ОТО Power Foot
Модель	PF-1500
Тип	Массажер ног и икр
Напряжение питания	220 <del>В</del> 240 В 50-60 Гц
Мощность	50 Вт
Габариты упаковки	567(Д) x 457(Ш) x 532 (В) мм
Авто таймер	10 минут
Вес Нетто	14 кг
Вес Брутто	15,8 кг
Сертификат РСТ	РОСС SG.ME67.B07448  ME 67
Сертификат качества ISO 9001	 

# ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Наименование изделия: ОТО Power Foot PF-1500

Страна происхождения: СИНГАПУР

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Место продажи: \_\_\_\_\_

**М. П.**

## ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю компании «ОТО BODYCARE» в вашем регионе или сервисный центр.

### Сервисный центр «ОТО BODYCARE»

140003, Московская обл., г. Люберцы, ул. Почтовое отделение 3, д. 59а

тел. 8-495-789-91-77 e-mail: info@otobodycare.ru web: www.otobodycare.ru

## СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_

Адрес покупателя: \_\_\_\_\_

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии. Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Уважаемый покупатель!

**Компания «OTO Bodycare Singarore» благодарит Вас за лучший выбор!**

Производитель товаров для здоровья Сингапурская компания «OTO Bodycare» имеет Сертификат Соответствия, все товары одобрены для использования РСТ Ме67. Компания «OTO Bodycare Singarore» гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Увеличенный срок гарантии равен 24 месяца со дня покупки.

В течении гарантийного срока компания «OTO Bodycare Singarore» берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

В случае, если Ваш товар по каким-либо причинам Вам не подходит. Вы можете его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего состояния, товарного вида, упаковки и документов.

### Условия увеличенной гарантии:

- Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - Правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
  - Наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
- Компания «OTO Bodycare Singarore» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае не предоставления вышеуказанных документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
- Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
- Гарантия не распространяется :
  - На случаи ущерба вызванные неправильной эксплуатацией;
  - На быстро изнашиваемые части ( чехол и обивка);
  - На случаи собственной вины покупателя.
- Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - Механических повреждений;
  - Не соблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых, ремонта или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами, подключения изделия к питанию не соответствующего Государственным Техническим Стандартам.
- Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством РФ.
- В случае наличия исправления, гарантийный талон считается недействительным.





625 Aljunied Road #04-01/02,  
Aljunied Industrial Complex  
Singapore 389836  
OTO Careline: (65) 6747 0656  
info@otobodycare.com

[www.otobodycare.com](http://www.otobodycare.com)

**Представительство  
OTO Bodycare в России**

140003, Московская обл.,  
г. Люберцы, п/о 3, д. 59а  
тел: 8 (495) 789-91-77  
факс: 8 (495) 983-34-78  
e-mail: info@otobodycare.ru

[www.otobodycare.ru](http://www.otobodycare.ru)