



ERGONOVA

OsteoCompact ME

Metal edition

массажный стол
с металлическими ножками

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажного стола Ergonova OsteoCompact ME (Metal edition)! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Примечание: цвет товара в инструкции может отличаться от реального.

Меры предосторожности

- Несоблюдение правил инструкции может привести к риску получения травмы. Перед использованием стола обязательно прочтите инструкцию.
- При распаковке стола проверьте состояние обивки. Не используйте его, если обнаружили повреждения. (Наша гарантия исключает повреждения, вызванные неправильной установкой, несчастным случаем, нарушением правил эксплуатации или использованием по нецелевому назначению.)
- Ограничение по весу (включая клиента и аксессуары):
 - Максимальная рабочая нагрузка: 204 кг
 - Максимальная статичная нагрузка: 1250 кг
- Перед размещением клиента убедитесь, что стол разложен полностью и правильно, без какого-либо наклона. Пациент может потерять равновесие и упасть.
- Не оказывайте чрезмерное давление на подголовник или накладные секции стола.
- Не подвергайте воздействию чрезмерной влажности или температуры.
- Пожалуйста, храните массажный стол подальше от детей и домашних животных.

Предупреждение: агрессивные моющие средства могут повредить обивочную ткань. Наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием моющих средств.

Указания по технике безопасности

Ежегодно проверяйте надежность всех соединений и стальных тросов. Свяжитесь с нами в случае обнаружения признаков износа, влияющих на безопасное использование.

Запрещается самостоятельно модифицировать стол.

Сборка стола

Поставьте сложенный столик резиновыми уголками вниз и откройте фиксирующие замки (рис. 1). Разложите ножки до конца. (Рис.2/3)



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Установка стола в вертикальное положение

Наклоняйте стол до тех пор, пока все четыре ножки не окажутся на полу.

Наклоните один конец стола, надавите на середину и слегка натяните тросы. (Рис.4)

Разборка стола

Переверните стол на бок резиновыми уголками вниз. Сложите ножки в стол и убедитесь, что все тросы находятся внутри стола. (Рис.4/3/2/1)

Установка подголовника



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

Вставьте направляющие подголовника в отверстия в столе.

Установите фиксирующий рычаг в горизонтальное положение ребристой стороной вверх. (рис.5) Отрегулируйте подголовник в нужное вам положение и опустите рычаг, чтобы зафиксировать подголовник. (Рис.6) Для того, чтобы снять подголовник, необходимо поднять рычаг вверх и потянуть на себя подголовник. (Рис.7)

Установка опоры для рук

Проденьте направляющие подголовника через петли опоры для рук. (рис.8/11) Вставьте подголовник в отверстия в столе и закрепите опору для рук липучками к верхней части подголовника, как показано на рисунке. (Рис.9/12) Положите подушку для лица на основание подголовника. (Рис.10/13)



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

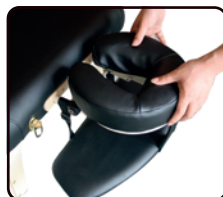


Рис. 13

Регулировка высоты стола

Чтобы поднять или опустить стол, выберите отверстие, соответствующее желаемой высоте, и поместите в него регулировочный винт. Повторите то же самое со всеми остальными ножками. Следите за тем, чтобы отверстия совпадали по высоте. (Рис.14)

* Пожалуйста, следуйте приведенным ниже действиям, если ваш складной массажный стол оснащен откидной спинкой:

Регулировка спинки

Поднимите спинку до необходимого положения. (Попросите клиента чуть привстать.) Удерживайте спинку кресла и вес клиента одной рукой. Поднимите спинку в самое высокое положение, затем опустите ее до конца. (Попросите клиента чуть привстать для упрощения манипуляций.) (рис.15/16)



Рис. 14



Рис. 15



Рис. 16

Использование отверстия для лица

Достаньте подушку из отверстия для лица. (рис. 17) Положите клиента лицом вниз и убедитесь, что он свободно дышит через отверстие для лица. Положите подушку обратно, если вы больше не нуждаетесь в отверстии для лица.



Рис. 17



Рис. 18

Использование подушки для лица

Достаньте подушку для лица из отверстия. Вставьте подушку для лица в отверстие. Положите клиента лицом вниз и убедитесь, что он свободно дышит через отверстие для лица. Положите подушку обратно, если вы больше не нуждаетесь в отверстии для лица. (Рис.22)

Дополнительные аксессуары для стола

Ниже приведен перечень дополнительных аксессуаров.

- Подушка для лица
- Подставка для лица
- Передний подлокотник
- Боковые подлокотники
- Торцевое отверстие и заполнитель торцевого отверстия
- Сумка для переноски

Уход за обивочной тканью

Чтобы гарантировать качество продукции и продлить срок службы вашего стола, мы написали ряд рекомендаций по уходу за обивкой вашего стола и аксессуарами к нему:

- Не храните стол при экстремально низких температурах, так как чрезмерный холод может привести к растрескиванию обивки. Пожалуйста, не ставьте свой стол в неотопляемых помещениях в холодную погоду.
- Избегайте хранения стола при экстремально высоких температурах, так как чрезмерное нагревание может привести к растягиванию и сморщиванию обивки. Убедитесь, что ваш стол находится вдали от обогревателей, электроприборов, прямых солнечных лучей в жаркую погоду.
- Накрывайте стол и аксессуары чехлом, фланелевой тканью из 100% хлопка или флисовой тканью.
- Ежедневно ухаживайте за обивкой. Мы рекомендуем чистить обивочную ткань мягким моющим средством, чтобы защитить ее от масляных пятен и загрязнений, которые со временем могут привести к растрескиванию и появлению более стойких пятен. Смешайте небольшое количество средства для мытья посуды с водой в пульверизаторе и протрите поверхность стола влажной тканью.
- Используйте обе стороны стола. Время от времени переустанавливайте подголовник с одного конца стола на другой.
- Не допускайте появления потёртостей, проколов на обивке.

Внимание:

1. Использование спиртовых растворов грозит пересушиванием обивки и ее растрескиванию.
2. Длительное воздействие экстремальных температур может привести к повреждению обивки.

Технические характеристики

Материал ножек: алюминий

Материал обивки: экокожа

Максимальная рабочая нагрузка: 204 кг

Максимальная статичная нагрузка: 1250 кг

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

